



ALLERGY ECO Teste

O TESTE *POINT OF CARE*
PARA 90% DAS ALERGIAS
MAIS COMUNS

Allergy 4 ECO Teste - 80954880163
Allergy 1 ECO Teste - 80954880164



Tecnologia
Alemã

Diversos estímulos de alergia, vários sintomas – uma ferramenta de diagnóstico: Allergy ECO Teste

O corpo reage inadequadamente às substâncias do ambiente. A alergia ao pólen, plantas, alimentos e outros podem ter um impacto negativo na vida das pessoas em qualquer época do ano. Um diagnóstico rápido e confiável é a chave para aliviar os sintomas e para um tratamento bem-sucedido das alergias. Os pacientes afetados geralmente sofrem de uma variedade de manifestações clínicas:

- Eczema alérgico
- Rinite e conjuntivite sazonal e perenal
- Asma alérgica
- Doenças gastrointestinais alérgicas

Quando o paciente é testado para alergias, o sangue (ou plasma/soro) é examinado para IgE específica do alérgeno, que é parte da reação de defesa do corpo à substância desencadeadora da alergia.

Existem várias condições relacionadas ao paciente que, às vezes, tornam os testes cutâneos impossíveis ou difíceis de serem executados. Em mulheres grávidas, crianças ou pacientes com quadro agudo de condições de pele, por exemplo, o diagnóstico de alergia por um método adequado, como o Allergy ECO Teste, é imprescindível.





ALLERGY
ECO Teste

TESTE RÁPIDO E PRECISO PARA 90% DAS ALERGIAS MAIS COMUNS.

Os Allergy 1 e 4 ECO Teste abrangem 90% das alergias mais comuns com mais de 20 parâmetros. Esta gama abrangente de alérgenos permite aos profissionais de saúde testarem o paciente durante a consulta, gastando apenas 30 minutos.

Os resultados rápidos e precisos possibilitam que o profissional de saúde inicie a terapia direcionada imediatamente ou encaminhe o paciente para testes adicionais.

ALLERGY ECO Teste

Prático

Rápido

Confiável

- Eficaz: teste de alergia para IgE específica de alérgenos em apenas 30 minutos com mais de 20 parâmetros em um único teste.
- Avaliação visual: resultados semiquantitativos que podem ser classificados em 5 níveis com correlação classe CAP.
- Abrange 90% das alergias mais comuns.*
- Manuseio rápido e simples sem necessidade de estrutura laboratorial.
- Diagnóstico confiável com apenas algumas gotas de sangue capilar.
- Não requer profissional especializado.
- Resultados rápidos que atendem às expectativas do paciente.
- Alérgenos e reagentes da mais alta qualidade.
- Recomendado por especialistas internacionais em alergia*.



Allergy ECO Teste – O único teste rápido semiquantitativo de alergia

O Allergy ECO Teste utiliza tecnologia de imunoenensaio enzimático [ELISA] semiquantitativo para determinação de IgE específica para alérgenos. Todo o kit, incluindo os reagentes, é fabricado sob os mais altos padrões de qualidade na Alemanha. Todos os componentes necessários para a realização do teste estão inclusos no kit, eliminando a necessidade de equipamentos ou insumos adicionais.

* Fonte:
Kleine-Tebbe et al.
Diagnósticos in vitro e bases moleculares de alergias alimentares mediadas por IgE. Allergo J 2009; 18: 132-46; Heinzerling et al. Teste padrão de picada na pele e sensibilização a alérgenos inalantes em toda a Europa - uma pesquisa da rede GALEN. Allergy 2005; 60: 1287-1300





ALLERGY
ECO Teste

ALLERGY ECO TESTE – KIT COMPLETO PRONTO PARA USO.



Amostra de
Sangue Capilar

Realização do teste
(Apenas 30 minutos)

Leitura dos
resultados

Diagnóstico e
tratamento

Kit completo

- Dispositivo teste Allergy ECO Teste
- Rack com os tubos reagentes identificados por cores
- Seringa para coleta de amostra e reagentes
- Kit para coleta de sangue: álcool pad, lanceta, pipeta capilar com heparina de lítio
- Instrução de uso com fotos ilustrativas
- Folha de avaliação dos resultados



Nosso objetivo: Otimizar o tempo de diagnóstico.

O Allergy ECO Teste é uma ferramenta simples e eficaz para o diagnóstico de hipersensibilidades do tipo I, e é a melhor alternativa em relação aos testes cutâneos ou de sangue em laboratório.

Os resultados semiquantitativos tornam o teste rápido de alergia uma ferramenta útil para confirmar a anamnese alérgica do paciente. A testagem simultânea com mais de 20 alérgenos com resultados imediatos permite processos eficazes de consulta e tratamento para profissionais de saúde e seus pacientes.

A possibilidade de iniciar o tratamento imediatamente é importante para otimizar o tempo de tratamento e aconselhar o paciente de forma efetiva.





ALLERGY
ECO Teste

RESULTADOS CONFIÁVEIS COMPROVADOS CIENTIFICAMENTE.

O Allergy ECO Teste é o resultado da busca por um sistema confiável que possibilite a avaliação imediata de alergias e, conseqüentemente, introdução ao tratamento. O Allergy ECO Teste combina a mais moderna tecnologia de pequenas quantidades de fluidos (microfluídica) com altos limites de detecção.

Os resultados dos testes são muito simples de avaliar.


Os resultados são semiquantitativos, ou seja, a classificação visual em 5 níveis permitem a correlação dos resultados nas respectivas classes CAP.

Estudos realizados por renomados profissionais em vários hospitais e institutos de pesquisa confirmam a alta precisão do Allergy ECO Teste em comparação com os sistemas de testes laboratoriais usuais. Os especialistas aprovaram o Allergy ECO Teste como novo teste *point of care* para avaliação de sensibilização a alérgenos. Os resultados mostraram que o grau de sensibilização ao alérgeno nos pacientes se correlaciona com os resultados do Allergy ECO Teste.

Correlação entre Allergy ECO Teste - nível, sensibilização, classe CAP e IgE.

Nível Allergy ECO Teste	Sensibilização	Classe CAP	IgE [kUA/L]	Sinal
1	Baixa	0 - 2	0 - 3.4	
2*	Moderada	2 - 3	0.7 - 17.4	
3	Alta	3 - 4	3.5 - 49.9	
4*	Muito alta	4 - 5	17.5 - 100	
5	Muito alta	5 - 6	> 50	

Legenda

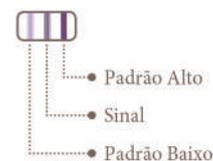

* Os dois padrões do Allergy 4 ECO Teste coincidem com o nível 2 e 4.
A classe CAP 2 é considerada frequentemente como uma sensibilização ambígua.



ALLERGY ECO Teste

PAINEL DE ALÉRGENOS DETECTADOS

ALLERGY 1

Ambrosia comum
Artemísia
Capim Timóteo
Centeio
Bétula
Pelo de gato
Pelo de cachorro
Clara de ovo
Leite
Bacalhau
Trigo
Amendoim
Soja
Aipo
Amêndoa
Nozes
Avelã
Gramma doce vernal
Gramma de pomar
Azevem
Gramma azul
Ficus
Látex
Dermatophagoides pteronyssinus
Dermatophagoides farinae

ALLERGY 4

Clara de ovo
Leite
Bacalhau
Trigo
Amendoim
Soja
Aipo
Amêndoa
Nozes
Avelã
Tomate
Maçã
Camarão
Cenoura
Batata
CCD*
IgE total
Salmão
Noz pecã
Carpa
Porco
Carne
Frango
Cordeiro
Kiwi
Laranja



* Determinantes de carboidratos de reatividade cruzada (CCD) são estruturas de carboidratos ligadas a proteínas presentes em uma ampla gama de alérgenos de plantas, pólen, moluscos e insetos.

Conheça também o teste
INTOLERÂNCIA ALIMENTAR ECO Teste
www.intoleranciaalimentar.eco.br

eco
DIAGNÓSTICA



EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Investition in Ihre Zukunft

WACHSTUMSKERNE
UNTERNEHMEN
REGION

